

# PRODUKTDATABLAD


## Flexicare iltbrille CO2 og O2 monitorering med female luer

Iltbrille til CO2 og O2 monitorering med female luer.

Oxygen leveres til begge næsebor via de nederste porte, og EtCO2 opsamles fra begge næsebor til sidestrøm eller Microstream CO2-monitorering gennem de øverste spidser.

Under udånding omdirigeres iltstrømmen for et nøjagtigt og pålideligt spor af kapnografi.

De bløde slanger reducerer friktion for øget komfort over ørerne og ansigtet.

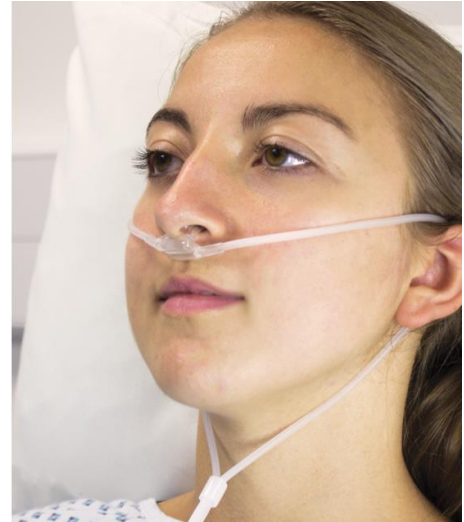

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	-
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ila
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	I kølige, rene og tørre omgivelser. Holdes væk fra varme og lys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Som medicinsk affald iht. lokale regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Flexicare iltbrille CO2 og O2 monitorering med female luer

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1540093	Flexicare	Iltbrille CO2 og O2 monitorering med female luer	210 cm	Æske af 25 stk	032-10-126